

Gebrauchsanweisung beachten

EN Follow instructions for use



nexsana® SITZKISSEN SEAT CUSHION **EN**



nexsana® Sitzkissen. Ergonomisches und unterstützendes Sitzkissen aus zertifiziertem Memory-Schaum mit weichem zugleich atmungsaktivem und waschbarem Stoffbezug in anthrazit.

****EN** nexsana® seat cushion. Ergonomic and supportive seat cushion made of certified memory foam with soft, breathable and washable fabric cover in anthracite.**

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

danke für die Entscheidung zum nexsana® Sitzkissen und das damit verbundene Vertrauen. Das nexsana Sitzkissen ist ein aus zertifiziertem Memory-Schaum hergestelltes und hochwertiges U-förmiges Sitzkissen mit weichem und zugleich atmungsaktivem, waschbarem Stoffbezug in anthrazit zur Erhaltung, Unterstützung und Förderung einer korrekten Sitzposition, Entlastung des Gesäßes, Unterbauches und des Rückens und kann zur Reduktion des Drucks in der Analregion beitragen. Weitere Informationen und Anwendungstipps sind auf der Rückseite zu finden.

****EN**** Thank you for choosing the nexsana® seat cushion and for the trust you have placed in it. The nexsana seat cushion is a high quality U-shaped seat cushion made of certified memory foam with a soft and at the same time breathable, washable fabric cover in anthracite to maintain, support and promote a correct sitting position, relieve pressure on the buttocks, lower abdomen and back and can help to reduce pressure in the anal region. Further information and application tips can be found on the back.

Für ein natürliches und wohliges Sitzen & viel Freude mit diesem Produkt wünscht



nexsana

Das nexsana® Sitzkissen ist ein ergonomisches und unterstützendes Sitzkissen. Der Härtegrad des CertiPUR-US-zertifizierten hochdichten viskoelastischen Memory-Schaums ist so gestaltet, dass eine optimal ausgewogene, unterstützende und zugleich bequeme Verteilung des Körpergewichts ermöglicht wird. Durch die ausgewogene Festigkeit können auch ein Durchsitzen sowie Druckschmerzen vermieden werden. Hierdurch liegt der erweiterte Gewichtsbereich zwischen ca. 40 bis 110 kg. Der für dieses Sitzkissen ausgewählte Mesh-Stoff ist atmungsaktiv und zugleich sehr weich sowie sanft zur Haut, kann per Reißverschluss vom Sitzkissen gelöst und bei 30 °C schonend maschinell gewaschen werden. Sitzkissen nicht im Ganzen waschen.

Ausparung für den Gesäßbereich.

EN Recess for the buttocks area.



Sitzkissen richtig herum positionieren.

EN Position seat cushion correctly.



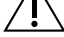
Bezug bei 30 °C schonend waschbar.
Keinen Trockner nutzen. Nicht bügeln.

EN Cover gently washable at 30 °C.
Do not use a dryer. Do not iron.



EN The nexsana® seat cushion is an ergonomic and supportive seat cushion. The hardness of the CertiPUR-US-certified high density visco elastic memory foam is designed in such a way that an optimally balanced, supportive and at the same time comfortable distribution of the body weight is made possible, thus avoiding both sitting through and pressure pains. Due to the special composition, the extended weight range is between approx. 40 and 110 kg. The mesh fabric selected for this seat cushion is breathable and at the same time very soft and gentle on the skin, can be detached from the seat cushion with a zip and gently machine washed at 30 °C. Do not wash the seat cushion as a whole.

Sitzkissen vor Kindern sichern und von Hitze und Feuer fernhalten.

EN Secure seat cushion from children and keep away from heat and fire. 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an den nexsana Kundenservice.

EN If you still have questions, please feel free to contact nexsana customer service.

nexsana GmbH

Windheckenweg 79, 53902 Bad Münstereifel, Deutschland

Telefon: +49 2253 93 999 41

Fax: +49 2253 93 999 93

E-Mail: service@nexsana.de

Internet:

www.nexsana.de

